

## Technisches Datenblatt Einweg Isolationskittel

Einweg Isolationskittel

LT321FYC, SSMMS, laminiert 55Gr/m<sup>2</sup>



### Produktbeschreibung

- SSMMS Vliesstoff, laminiert
- Gewicht: 55g / m<sup>2</sup>
- Flüssigkeitsbeständiger als SMMS
- Atmungsaktiv

### Material

5-lagiger SSMMS Aufbau: Spinnvlies – Spinnvlies – Meltblown – Meltblown – Spinnvlies

### Zertifizierung

Die Norm DIN EN 14126 umfasst folgende Tests für das Material der Schutzbekleidung

- Widerstand gegen Viren (ISO/FDIS 16604)
- Widerstands gegen die Penetration von Infektionserregern (ISO/DIS 22610)
- Widerstand gegen kontaminierte Feststoffteilchen (ISO/DIS 22612)

**CE-Zertifikat** nach EN13688:2013 Allgemeine Anforderungen für Schutzkleidung

EN 13034:2005 + A1:2009 (Chemikalien-schutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien und begrenzter Tragedauer)

**Gebrauchsanweisung**



**GEBRAUCHSANLEITUNG:**

**İNTEGRAS SAVUNMA VE MEDİKAL A.Ş.**  
*Mutlukent Mah. 2001 Sok. Nr: 2 Çankaya / ANKARA*

**Markenname:** Loxtay  
**Artikel Modellnummer:** LT321FYC  
**Produktionsdatum:** 01.2021

**SICHERHEITSHINWEISE:** Die Schutzkleidung sollte auf Mängel und Fehlfunktionen überprüft werden, wie z.B. Risse, Löcher und loser Schmutz. Sie sollte nicht getragen werden, wenn sie fehlerhaft und/oder verschmutzt ist.

**Achtung!** Es ist gefährlich, mit der Tüte zu spielen, da dies zu Erstickungsgefahr führen kann. Bitte halten Sie diese von Kindern und Babys fern.

"Bei längerer Verwendung in gemäßigten Klimazonen und Umgebungen kann es zu Überhitzung kommen."  
"Entzündliches Material. Von Feuer fernhalten."

**VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN:** Beim Entfernen der verschmutzten Kittel ist Vorsicht geboten, außerdem sollte der Kontakt mit gefährlichen Materialien vermieden werden. Die Kittelnähte schützen möglicherweise nicht vor Infektionserregern. Die endgültige Entscheidung und Verantwortung für den Anwendungsschutz des Kittels liegt beim Benutzer. Sollte der Kittel in Kombination mit anderen Schutzausrüstungen getragen werden, dann sollten zum Beispiel die Handschuhe vorher über die Hände gezogen sowie die Atemschutzmaske am Kopf befestigt werden. Die Eignung dieser Kombination liegt im Ermessen des Benutzers. Die Person, die den Kittel trägt, muss für die im Körper erzeugte statische Elektrizität ordnungsgemäß geerdet sein. Bei der Erdung sollte der Widerstand der Person weniger als 108 Ohm betragen. Diese Bedingungen können leicht durch das Tragen geeigneter Schuhe geschaffen werden. Die Verwendungsdauer des Produkts und die Auswirkung der Arbeitsumgebung auf den Nutzungskomfort sollten im Voraus geplant werden.

**LAGERUNG / ENDGEBRAUCH:** Es wird empfohlen, den Kittel in Pappe oder Pappkartons vor Sonnenlicht bei 15 bis 25 °C zu lagern. Bei Lagerung unter geeigneten Bedingungen sollte er innerhalb von 3 Jahren nach dem Herstellungsdatum verwendet werden.

**ENTSORGUNG UND RECYCLING:** Nicht kontaminierte Produkte können als allgemeiner Abfall behandelt oder recycelt werden. Kontaminierte Produkte sollten als gefährlicher Abfall behandelt und gemäß den nationalen Vorschriften als gefährlicher Abfall entsorgt werden.



Einweg-PSA  
Nicht wieder  
Verwendbar



Nicht waschbar



Nicht im Trockner  
trocknen



Keine chemische  
Reinigung



Nicht bügeln



Benutzen Sie keine  
Bleichmittel

ENGLISH	DEUTSCH
<b>PRODUCT FEATURES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non-Sterile</li> <li>• Non-Woven fabric</li> <li>• SMS- fabric</li> <li>• Long sleeved gown with open back, under knee length</li> <li>• No liquid leakage</li> </ul>	<b>PRODUKTMERKMALE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nicht steril</li> <li>• Aus nicht gewebtem Stoff</li> <li>• SMS- Material</li> <li>• Langärmel mit offenem Rücken, unter Knielänge</li> <li>• Keine Flüssigkeitsleckage</li> </ul>

ENGLISH				ENGLISH
				<b>USAGE INSTRUCTIONS ?</b> A- It is held from the shoulders. B- Contaminated outer face is turned inward. C- It is folded by rolling. D- When removed, only the clean side should appear
DEUTSCH				DEUTSCH
<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b> A- Der Kittel sollte von den Schultern abgezogen werden. B- Kontaminierte Außenseite nach innen drehen. C- Aufrollen und falten. D- Beim Entfernen sollte nur die saubere Seite sichtbar sein.				

**PRODUKTLEISTUNGSWERTE**

Schwefelsäure (NaOH) 30% Abweisung gegen Flüssigkeiten: Klasse 3, Penetration: Klasse 3.  
Natriumhydroxid (H2SO4) 10% Abweisung gegen Flüssigkeiten: Klasse 3, Penetration: Klasse 3.  
**Für EN 13034:2005+A1:2009;**

Geprüft auf Beständigkeit gegen das Eindringen von Flüssigkeiten in leichter Sprühform (Nebeltest). Typ PB [6],  
Teilkörperschutz, wurden nicht dem vollständigen Kleidungsstücktest unterzogen.  
Ljmn, 82/90 ≤ 30%  
LS, 8/10 ≤ 15 %

**Für EN 14126:2003+AC:2004;**

In den Tests wurden ATCC 9372 Bacillus atrophaeus-Sporen verwendet. Klasse 3 gemäß Tabelle 4



**Pflegetikett**

**PS** HANDEL FÜR  
INDIVIDUELLE  
MEDIZINPRODUKTE

**Größe: XL**



1 2 5 1 9 1 2 9 0 0 1 5 5

Importiert und vertrieben durch:

P&S Handels GmbH  
Auf der Gemark 1  
40625 Düsseldorf  
Germany  
[info@ps-Handel.com](mailto:info@ps-Handel.com)  
Tel: +49 211 29362345  
WWW.PS-HANDEL.COM

**PS** HANDEL FÜR  
INDIVIDUELLE  
MEDIZINPRODUKTE

**Größe: XXL**



1 2 5 1 9 1 2 9 0 0 1 6 2

Importiert und vertrieben durch:

P&S Handels GmbH  
Auf der Gemark 1  
40625 Düsseldorf  
Germany  
[info@ps-Handel.com](mailto:info@ps-Handel.com)  
Tel: +49 211 29362345  
WWW.PS-HANDEL.COM

**PS** HANDEL FÜR  
INDIVIDUELLE  
MEDIZINPRODUKTE

**Größe: XXXL**



1 2 5 1 9 1 2 9 0 0 1 7 9

Importiert und vertrieben durch:

P&S Handels GmbH  
Auf der Gemark 1  
40625 Düsseldorf  
Germany  
[info@ps-Handel.com](mailto:info@ps-Handel.com)  
Tel: +49 211 29362345  
WWW.PS-HANDEL.COM

**PS** HANDEL FÜR  
INDIVIDUELLE  
MEDIZINPRODUKTE

**Größe: L**



1 2 5 1 9 1 2 9 0 0 1 4 8

Importiert und vertrieben durch:

P&S Handels GmbH  
Auf der Gemark 1  
40625 Düsseldorf  
Germany  
[info@ps-Handel.com](mailto:info@ps-Handel.com)  
Tel: +49 211 29362345  
WWW.PS-HANDEL.COM

**PS** HANDEL FÜR  
INDIVIDUELLE  
MEDIZINPRODUKTE

**Größe: M**



1 2 5 1 9 1 2 9 0 0 1 3 1

Importiert und vertrieben durch:

P&S Handels GmbH  
Auf der Gemark 1  
40625 Düsseldorf  
Germany  
[info@ps-Handel.com](mailto:info@ps-Handel.com)  
Tel: +49 211 29362345  
WWW.PS-HANDEL.COM

**PS** HANDEL FÜR  
INDIVIDUELLE  
MEDIZINPRODUKTE

**Größe: S**



1 2 5 1 9 1 2 9 0 0 1 2 4

Importiert und vertrieben durch:

P&S Handels GmbH  
Auf der Gemark 1  
40625 Düsseldorf  
Germany  
[info@ps-Handel.com](mailto:info@ps-Handel.com)  
Tel: +49 211 29362345  
WWW.PS-HANDEL.COM


**PS** HANDEL FÜR  
INDIVIDUELLE  
MEDIZINPRODUKTE

**Loxtay**  
LAMINATED DISPOSABLE  
SURGICAL GOWN  
Model No: LT321FYC

**XL**  
EN 14126:2003

**71 CM**  
**121 CM**

**CAT III**  
EN 13034:2005

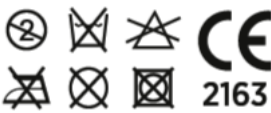

**CE**  
**2163**  
Made in Turkey



UNIVERSAL



## EU TYPE PRÜFBESCHEINIGUNG

**Bescheinigungsnummer: 2163-PPE-1428**

**İntegras Savunma ve Medikal A.Ş.**

Mutlukent Mah. 2001 Sok. No:2 Çankaya /ANKARA

**Produktionsstandort:**

Güzelevler Mahallesi, Orkide Sok. No:8, Yüreğir, Adana / TÜRKİE

Hiermit wird bestätigt, dass technische Unterlagen des Herstellers (am 27.08.2020 ausgestellt) und nachstehende persönliche Schutzausrüstungsprodukt geprüft wurden und die Unterlagen und Produkte geltende grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gemäß Anhang II der Verordnung (EU) 2016/425 auf Basis der technischen Evaluation und Dokumentation und entsprechende Testberichte erfüllen.

### Identifizierung der Persönlichen Schutzausrüstung

**Markenname: LOXTAY Modell: LT321FYC**

Isolationskleid hergestellt aus Polypropylen, Vliesstoff als Schutzkleidung, Type PB[6]-B mit teilweise ultraschallgeschweißte Überwendlichnähte und Gurte. Kleid ist in 6 Größen erhältlich.

### Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet:

**EN ISO 13688:2013**, (Allgemeine Anforderungen für Schutzkleidung)

**EN 13034:2005+A1:2009**, (Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien) Type PB [6], Schutzkleidung mit begrenzter Tragedauer,

**EN 14126:2003/AC:2004**, (Schutzkleidung gegen Infektionserreger) für Type PB [6]-B, begrenzter Lebensdauer

Hersteller kann die Nummer der Benannten Stelle (2163) benutzen und kann CE-Kennzeichnung wie nachstehend abgebildet in obengenannten Produktkategorie III mit folgenden Anforderungen fixieren;

- Abgabe einer entsprechenden EG-Erklärung über die Konformität gemäß **Verordnung** von **persönlichen Schutzausrüstung (EU) 2016/425 Anhang 9**.
- Laufende erfolgreiche Leistung zur Erfüllung der Anforderungen gemäß **Verordnung** von **persönlichen Schutzausrüstung (EU) 2016/425** und harmonisierten Normen, die durch die Bewertungen auf der Grundlage von **Anhang 7 (Module C2) oder Anhang 8 (Module D)** der Verordnung gesichert sind.

Diese Bescheinigung wurde ursprünglich am **09/09/2020** ausgegeben und ist gültig 5 Jahre ab dem Ausstellungsdatum.

Verify the validity with the QR Code.



2163

A.T.S.E YERİCİME HİZMETLERİ BİLG.  
YAY. İNŞ. SAN. VE TİC. L. D. ŞTİ.  
Mutlukent Mah. 2001 Sok. No:2  
Çankaya / ANKARA  
Orkide Sok. No: 8, Yüreğir / Adana  
Tic. Sic. No: 220143 Tic. Sic. No: 00113611200001  
Tel: 0312 447 20 40

(Unterschrift)  
Svat KACMAZ  
UNIVERSAL CERTIFICATION  
Direktor

Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok No:4484 Yukarı Dudulla Önceriye - İSTANBUL - TÜRKİE T: +90 216 455 80 80